

AUTOCLAV
PRIMA



Autoclav PRIMA

EVOLUȚIE TEHNICĂ, DESIGN EXCELENT

Laboratorul Galbiati - 100% Italian

Departamentul nostru de "cercetare și dezvoltare" a creat PRIMA, un **sterilizator cu aburi** de clasă B, cu design simplificat, care combină tehnologia de ultimă generație cu ușurința de utilizare.

Solid, facil și elegant, este cel mai nou dispozitiv din familia de produse Galbiati, prima firmă producătoare de unit-uri stomatologice din Italia.


SPECIFICAȚII TEHNICE

- **Tensiune nominală:** a.c.220V 230V, 50Hz
- **Putere nominală:** 18 L 1500VA, 23L 1700VA
- **Material:** oțel inoxidabil (pentru uz medical)
- **Presiune maximă de lucru:** 2,5 bar
- **Presiune minimă de lucru:** 0,9 bar
- **Temperatura maximă:** 145 °C
- **Volumul camerei:** 18L (Φ245×320mm) 23L (Φ245×450mm)
- **Dimensiune de încărcare:** 18L (198×204×285) 23 L (198×204×385)
- **Greutate maximă de încărcare:** 18L (3,07 kg/cm²)/ 23L (3,21kg/cm²)23
- **Presiune/temperatură de lucru:** 1,10~1,30bar / 121°C~122°C; 2,10~2,30 bar / 134°C~135°C
- **Volumul de apă pentru un ciclu:** 0,16 L (min) 0,18 L (max)

CARACTERISTICI

- Cicluri rapide (26 min pentru HOLLOW 134°C)
- Consum limitat de apă
- Descărcare automată a apei
- 100% oțel inoxidabil
- Control electronic al calității apei
- Sistem ușor de poziționat
- Test de conformitate GKE helix
- Imprimantă integrată și sisteme de salvare a datelor cu USB
- 24 de luni garanție

DIMENSIUNI

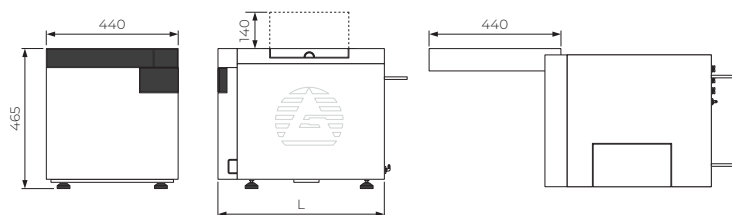

Produs	Modelul de 18L	Modelul de 23L
Mărime cu ușa închisă	L615×465×440	L715×465×440
Mărime cu ușa deschisă	L1005×605×440	L1105×605×440

Panou de control

Simple și intuitiv

Rezervor de apă

Din oțel inoxidabil

Display

Ecran care afișează
ciclurile de utilizare,
pentru control mai bun


Cameră de sterilizare

Cameră cu 4 tăvi supraetajate,
potrivită și pentru truse chirurgicale



Conectori facili

Pentru sursa de apă și
drenaj

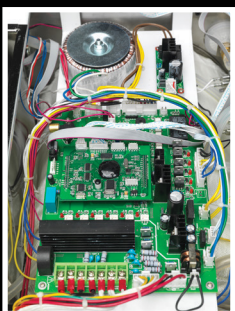

Placă PCB principală

Ușor accesibilă pentru mentenanță

Galbiati

EXPERIENȚĂ ȘI CALITATE DIN 1935

“Când un produs nu funcționează cum ar trebui, sau nu este pe placul clienților noștri, pentru noi este o provocare. Considerăm că din fabrica noastră trebuie să fie produse numai produse bune, funcționale și accesibile tuturor.

Angajamentul nostru zilnic este să ne satisfacem clienții și să fim prezenți înainte, în timpul și după achiziționarea produselor Galbiati, cu aceeași pasiune și dăruire.”



Galbiati 1935 Srl – Via Concordia,10 Assago (MI) ITALY
www.galbiati.com info@galbiati.com